

## 新鮮凍結血漿融解装置

# Barkey プラズマサームV

型式：DTM-V301

水が空気に触れない、衛生的な温湯式  
清潔に効率よくFFPを融解します

### 衛生的

水が直接空気に触れず  
**清潔に** FFPの  
**融解**が可能

### メンテナンスが楽

水の交換は  
**年1回!**

### 簡単・効率的

最大3ステップで  
**最大4バッグ\***  
**同時融解!**

プラズマサーム史上  
**最速融解設計**  
従来品より  
融解時間が  
**大幅短縮!**

パドルの振盪機能  
向上により  
融解効率が  
さらに **UP!**



※240ml/バッグの場合

衛生的

## 加温水が空気に触れず、清潔に作業が行えます！


温湯が循環しているクッションでFFPを挟むことにより全面を均一に加温し、パドルの運転、振盪機能でスピーディーに融解を行います。水が直接空気に触れないため、清潔に作業が行え、汚染リスクを低減します。水を使いドライヒーティングを行う新しい血漿融解装置です。



パドルの運転で融解時間が短縮！



※画像はFFP240mlを融解する場合のイメージです。

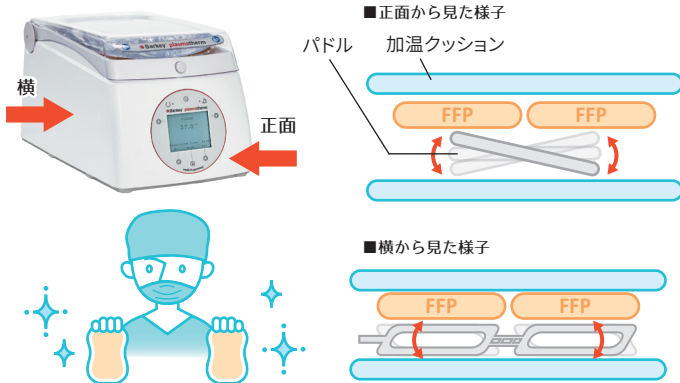

お手入れ  
ラクラク

## 水の交換は年1回。 メンテナンスが容易！

水の交換目安は年1回のみで、日常的な交換は必要ありません。また、本体は鋭角な部分を最大限に減らした丸みのある形状、錆に強いプラスチック製で、汚れを取り除きやすく簡単にメンテナンスができます。



### ポイント！ 融解中の異常に気づきやすい

FFPバッグを設置するカバーが透明なため、融解中の様子が目視確認できます。また、水漏れ感知機能搭載で常時モニタリングされていますので、もしもの水漏れ・液漏れにも素早く対応することが可能です。

### もしもを防ぐ、安全機能

水漏れ感知・蓋開放時自動停止  
過加温時自動停止：融解温度を37℃に自動制御しています

簡単  
効率的

## 最短3ステップで、 最大4バッグ<sup>※</sup>を同時融解！

※240mlバッグの場合

『①電源投入、②FFPを設置、③スタートボタンを押す』の3ステップで融解がスタート！操作はわかりやすく、見やすい表示で簡単・迅速にFFPの融解が行えます。また240mlバッグの場合、最大4バッグまで同時融解が可能です。

融解温度  
37℃自動制御

大きく透明な開口部

簡単な操作  
わかりやすい表示

ラクラク  
操作で安心♪



### 製品仕様

サイズ	34cm (W) × 32cm (H) × 60cm (D)	水交換	年1回 約9ℓ (目安) ※精製水を使用してください。
重量	本体重量：18kg / 水充填時：27kg	付属品	取扱説明書・簡単操作ガイド・保証書(1年間)
電源	定格電源電圧：100-120V 50/60Hz	一般的名称	血漿融解装置
同時融解バッグ数	最大4バッグ ※240mlバッグの場合	販売名 / 型式	BarkeyプラスサムV / 型式：DTM-V301
融解温度 / 加温時間	37℃ / 初期設定15分(変更可能)	製造国 / 製造会社	ドイツ / Barkey GmbH & Co. KG

医療機器届出番号：13B2X00117000040

製造販売元

Something to Life **METS** 株式会社 メッツ

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp  
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mets-tokyo.jp

ホームページに  
アクセス



代理店